

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL	CLST09561
NOMBRE:	TRAZODONA
FORMA FARMACÉUTICA:	Comprimido
PRINCIPIO ACTIVO:	Trazodona Clorhidrato
COMPOSICIÓN:	Cada comprimido contiene Trazodona Clorhidrato 50 mg
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido redondos, biconvexos de color rosado pálido, lisos por ambas caras, libres de material extraño

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A. Los tiempos de retención de los picos correspondiente a Trazodona Clorhidrato en el cromatograma de la solución muestra corresponde al obtenido en la solución estándar tal como se obtiene en la valoración.

B. El espectro UV de la muestra de Trazodona exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 Criterio de aceptación: 148,0 – 172,0 mg/comp

3.4 VALORACIÓN DEL TRAZODONA CLORHIDRATO

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de contenido para Trazodona Clorhidrato por variación de peso para.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 45,0 – 55,0 mg/comprimido (90,0 – 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN (Por variación de Peso)

3.5.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Utilizar los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas de la valoración para estabilidades.

3.5.2 Por Variación de Peso

De los resultados obtenidos para la valoración de Trazodona (mg/comp), calcular el contenido de Trazodona en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como porcentaje (%), por la siguiente fórmula:

$$F = \frac{mg/comp (valoración)}{P_{promedio (mg)etiquetado}} \times 100$$

$$\%Trazodona = F \times \text{Peso individual de cada comprimido}$$

A partir de estos resultados calcule:

X= Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentajes

S= Desviación estándar.

3.5.3 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.4 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN (TEST I USP)

Aparato: 2 (Paletas)
Velocidad: 50 RPM
Tiempo: 60 minutos
Medio: HCl 0,01N
Volumen: 900 mL

3.6.1 **Preparación Ácido Clorhídrico 0,01N:** A 5000 mL de Agua purificada tipo I Osmotizada agregar 5 mL de Ácido Clorhídrico concentrado y llevar a volumen de 6000 mL con agua purificada.

3.6.2 **Preparación solución muestra:** Colocar el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 RPM. Colocar un comprimido en cada vaso. Operar el equipo y al término de 60 minutos tome una porción aproximadamente de 20 mL de cada vaso. Pasar a través de membrana tipo PVDF o Nylon de $0,45 \mu\text{m}$ indistintamente,

descartando los primeros 4 mL de solución (máximo 3 muestras por filtro). (Concentración 56 ppm).

Nota: Usar el mismo estándar y condiciones cromatográficas empleadas en la Valoración.

3.6.3 Cromatograma Guía

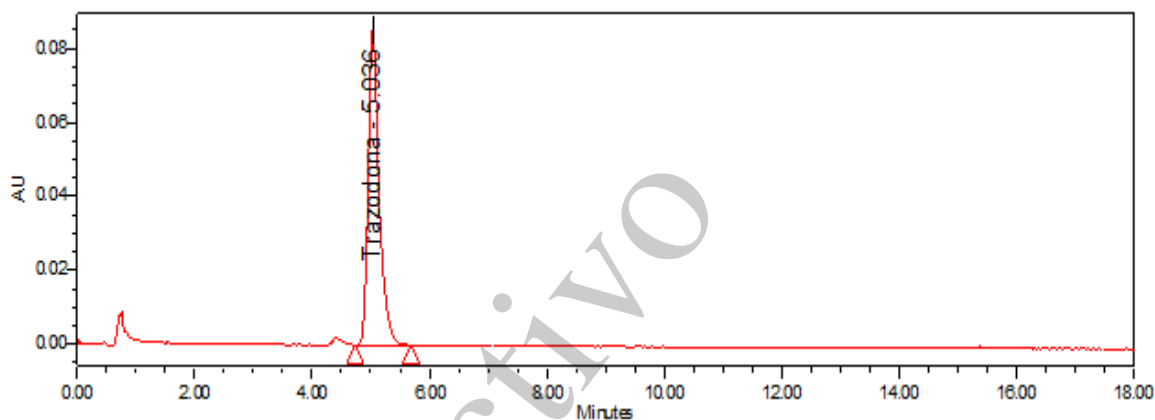


Figura N°1. Cromatograma correspondiente de la solución estándar

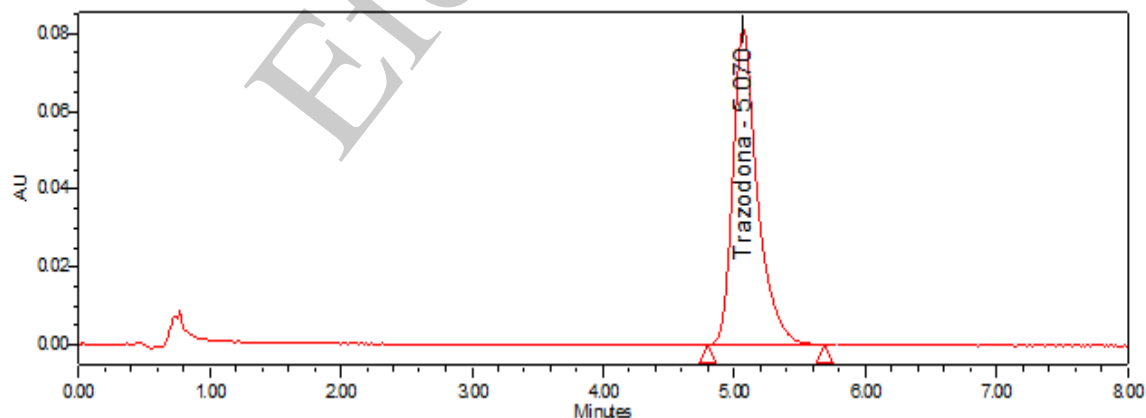


Figura N°2. Cromatograma correspondiente de la solución muestra

3.6.4 Cálculos

Determinar la cantidad disuelta de Trazodona según la siguiente fórmula.

$$\%Trazodona \text{ Disuelta} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Astd: Área del estándar de Trazodona
Pstd: Peso del estándar de Trazodona (mg)
Pot: Potencia del estándar de Trazodona

3.6.5 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Trazodona HCl se disuelve en 60 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de $n=6$ debe ser $<110\%$
- Set de disolución con 2 valores mayores o iguales a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etap a	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5\%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que $Q - 15\%$
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que $Q - 15\%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25\%$

Tabla N°2. Criterios de Aceptación Disoluciones.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

3.7.1 Solución A: Mezclar 85 partes del modificador inorgánico preparado para la Valoración (Buffer KH_2PO_4 pH 5,5) con 15 partes de Metanol. Filtrar por PVDF de 0,45 μm .

3.7.2 Solución B: Acetonitrilo

3.7.3 Fase móvil:

Tiempo	Solución A	Solución B
0	75	25
15	75	25
25	40	60
30	40	60
35	75	25
40	75	25

Tabla N°3. Gradiente Fase móvil

- 3.7.4 **Diluyente:** Metanol: Agua Purificada: Ácido Clorhídrico (650:350:3)
- 3.7.5 **Solución Stock Compuesto Relacionado C:** Pesar 10,0 mg de estándar Compuesto Relacionado C en un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente y llevar a volumen con diluyente. (Concentración Compuesto Relacionado C 100 ppm).
- 3.7.6 **Solución de adecuabilidad:** En un balón volumétrico de 100 mL, pesar 50 mg de estándar de Trazodona, adicionar 60 mL de diluyente y sonicar por 10 minutos. Transferir alícuota de 5 mL del estándar stock de Trazodona Compuesto relacionado C. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana tipo PVDF o Nylon de 0,45 µm, descartando los primeros 4 mL de solución. (Concentración Trazodona 500 ppm, Compuesto relacionado C 5 ppm).
- 3.7.7 **Estándar stock de Trazodona:** Pesar 12,5 mg de estándar de Trazodona en un balón volumétrico de 25 mL. Adicionar 15 mL de diluyente y sonicar durante 10 minutos. Permitir enfriar, llevar a volumen con diluyente. (Concentración 500 ppm).
- 3.7.8 **Estándar pureza de Trazodona:** Transferir una alícuota de 1 mL del estándar stock de Trazodona a un balón volumétrico de 100 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana tipo PVDF o Nylon de 0,45 µm, descartando los primeros 4 mL de solución. (Concentración 5,0 ppm).
- 3.7.9 **Solución Sensibilidad:** Transferir una alícuota de 5 mL del estándar de pureza de Trazodona (numeral 3.7.8) a un balón volumétrico de 10 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana tipo PVDF o Nylon de 0,45 µm, descartando los primeros 4 mL de solución. (Concentración 2,5 ppm).

La solución estándar es estable por 15 horas almacenada en recipiente de vidrio con tapa, bajo las condiciones ambientales del laboratorio de control calidad.

- 3.7.10 **Solución de muestra de pureza:** Triturar no menos de 10 comprimidos. Pesar aproximadamente 160 mg de muestra, (equivalentes a 50 mg de Trazodona), en un balón de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente y agitar por 10 minutos. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana tipo PVDF 0,45 µm descartando los primeros a 4 mL la solución o PTFE 0,45 µm sin volumen de saturación. (Concentración Trazodona 500 ppm).

La solución estándar es estable por 12 horas almacenada en recipiente de vidrio con tapa, bajo las condiciones ambientales del laboratorio de control calidad.

3.7.11 Condiciones Instrumentales

Columna:	Luna C18 125 x 4.0 mm 5 µm
Volumen de inyección:	10 µL
Temperatura de la columna:	35°C
Longitud de onda:	254 nm
Flujo:	1.4 mL/min
Tiempo de retención aprox:	Trazodona CRC: 8,6 minutos (Ancho de banda 7,5 – 8,9 minutos) TRR 0.85 Trazodona: 10,2 minutos (Ancho de banda 9,0 – 11,2 minutos) Trazodona CRD: 12,3 minutos (Menor a 15 minutos) TRR 1.2
Concentración de trabajo:	Estándar Trazodona: 5 ppm Muestra: 500 ppm
Tiempo de corrida:	Estándar y Adecuabilidad: 15 minutos Muestra y Blanco: 40 minutos

Nota: El flujo se puede modificar desde 1,2 mL/min hasta 1,6 mL/min para ajustes en los tiempos de retención.

3.7.12 **Procedimiento:** Inyectar 1 vez la solución de adecuabilidad, 1 vez la solución de Sensibilidad (La relación señal ruido s/n para una inyección de la solución de sensibilidad debe ser mayor a 10) y 5 veces consecutivas la solución estándar y una vez cada muestra. Registrar los cromatogramas.

3.7.13 Condiciones de adecuabilidad

Platos teóricos	No es menor de 1200 para Trazodona en el Estándar
Factor de asimetría	0,8 – 2,0 para Trazodona en el STD
Resolución (Solución de Adecuabilidad)	NLT 2,5 entre Trazodona CRC y Trazodona
% RSD de la solución	Máximo 5,0%
Resolución s/n Solución Sensibilidad	>10

Tabla N°4. Condiciones de adecuabilidad

3.7.14 Cromatogramas característicos

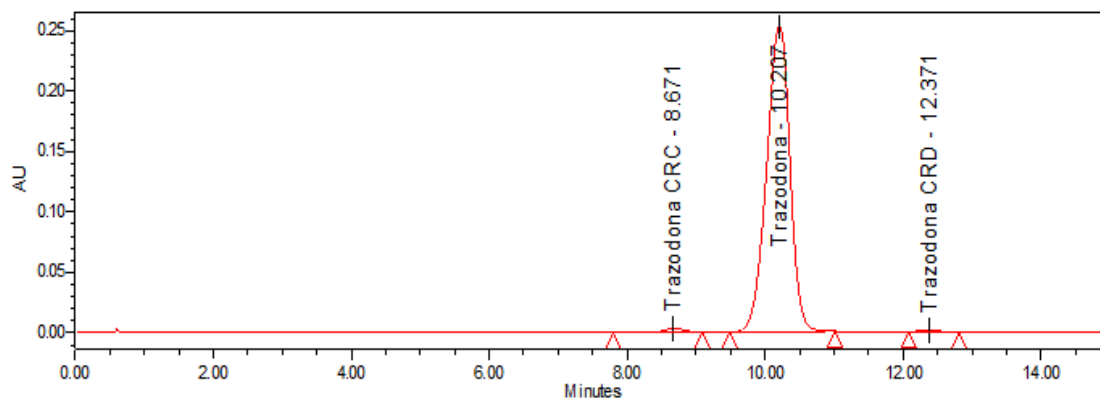


Figura N°3. Cromatograma correspondiente a la solución de Adecuabilidad

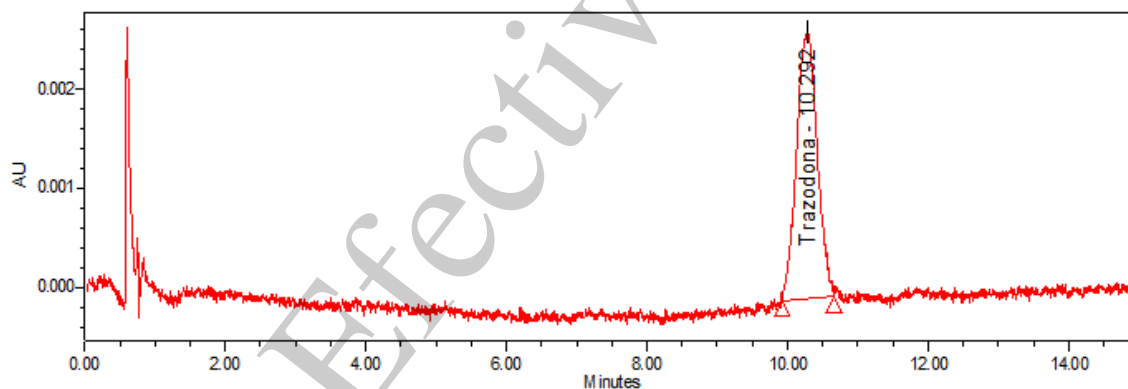


Figura N°4. Cromatograma correspondiente a la solución estándar

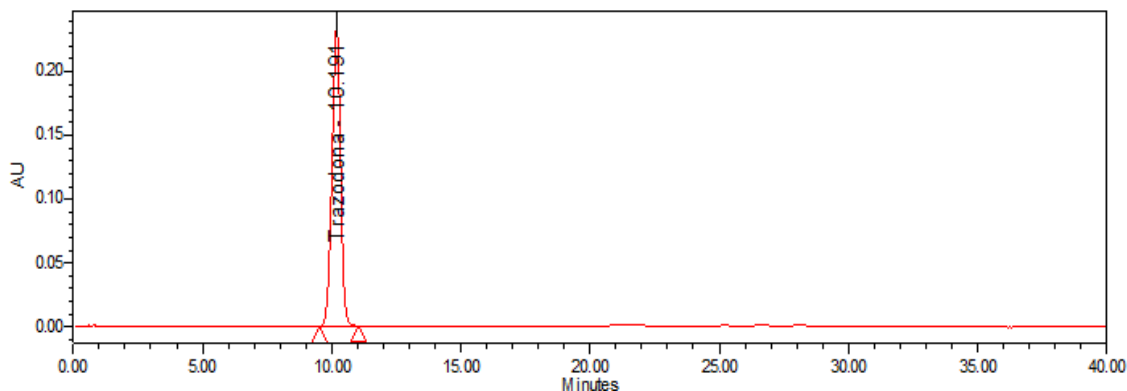


Figura N°5. Cromatograma correspondiente a la solución muestra

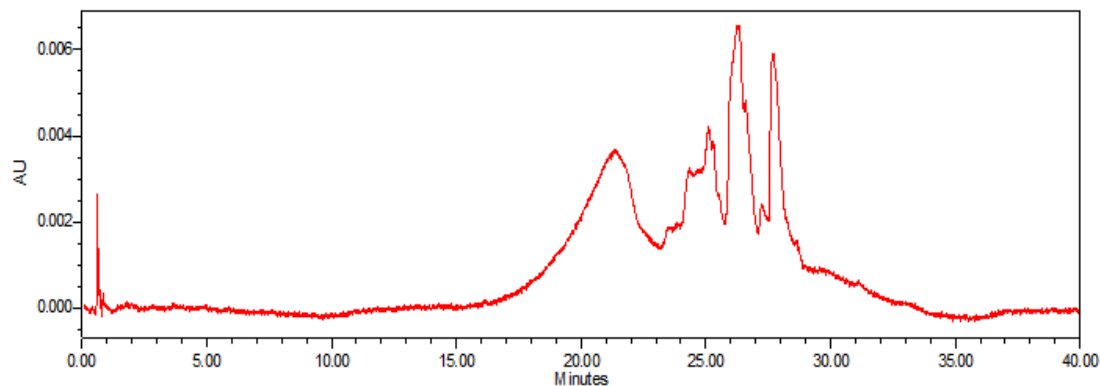


Figura N°6. Cromatograma correspondiente al blanco

3.7.15 En caso de carencia de la Columna oficial utilizar alternativa Novapack C18 150 x 4,0 mm 3,9 μ m, con las siguientes condiciones sustentadas en el método de validación.

Columna: Novapack C18 150 x 4,0 mm 3,9 μ m
 Volumen de inyección: 10 μ L
 Temperatura de la columna: 35°C
 Longitud de onda: 254 nm
 Flujo: 1.6 mL/min - 1.8 mL/min
 Tiempo de retención aprox: Trazodona CRC: Debe eluir adyacente a la Trazodona con una Resolución no menor a 2,2
 Trazodona: El tiempo de retención para esta condición debe ser menor o igual a 14 minutos
 Concentración de trabajo: Estándar Trazodona: 5 ppm
 Muestra: 500 ppm
 Tiempo de corrida: Estándar y Adecuabilidad: 15 minutos
 Muestra y Blanco: 40 minutos

3.7.15.1 Fase Móvil

Tiempo	Solución A	Solución B
0	78	22
15	78	22
25	40	60
30	40	60
35	78	22
40	78	22

Tabla N°5. Condiciones Gradiente columna alterna

3.7.16 Cálculos

$$\% \text{Algun producto de degradación individual inespecífico} = \frac{Almp\ mta}{Astd} \times \frac{Pstd}{25\ mL} \times \frac{1\ mL}{100\ mL} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100\ mL}{Pmta} \times \frac{PP}{50\ mg} \times 100$$

Dónde:

Almp Mta: Área de impureza inespecífica de Trazodona
Astd: Área del estándar de Trazodona
Pstd: Peso del estándar de Trazodona (mg)
Pmta: Peso de la muestra (mg)
PP: Peso promedio de las 20 tabletas
Pot: Potencia del estándar de Trazodona

En caso de impurezas no detectables reportar como <LOD= 0,75 ppm equivalente a 0,15% respecto a la concentración de la solución muestra.

3.7.17 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención Relativo	Criterio de aceptación (%)
Triazolopiridinona	0.1	-
Clorofenilpiperazina	0.5	-
Hidroxipropilclorofenil Piperazina	0.6	-
Isotrazodona	0.7	-
Trazodona Compuesto Relacionado C	0.85	-
Trazodona Clorhidrato	1.0	-
Trazodona dimero	1.1	-
Trazodona Compuesto Relacionado F	1.2	-
Análogo de Bispiperazina	1.4	-
Piperazina Bis (3-Clorofenil)	1.8 – 2.0	-
Algún producto de degradación individual inespecífica	-	1.0
Producto Total de Degradación	-	2.0

Tabla N°6. Criterios de aceptación impurezas

Posibles impurezas de degradación:

Componente	TRR
Imp Inespecífica I-1	1,782
Imp Inespecífica I-2	1,842
Imp Inespecífica I-3	2,011
Imp Inespecífica I-4	2,039
Imp Inespecífica I-5	2,253

Tabla N°7. Tiempos de Retención Relativos impurezas de degradación

Señales desconocidas con señal ruido (s/n) menor a 10 no cuantificar y reportar como menor al límite de detección.

3.8 TRAZAS

3.8.1 ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA ANALÍTICA
Límite de Trazodona	Tableteadora Unipress	Máximo 103, ppm	Norma Técnica propia
	Detector de Metales	Máximo 10 ppm	
Límite de detergente (Desko alcalino)	Tableteadora Unipress Detector de Metales	Máximo 10 ppm	Norma Técnica propia

3.8.2 ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE TRAZODONA EN AGUAS DE LAVADO DE EQUIPOS DE FABRICACIÓN

Método: Espectrometría UV

Reactivos: Agua purificada

Preparación del estándar: Pesar exactamente cerca de 50,0 mg de Trazodona estándar de referencia, llevarlos a un balón volumétrico de 100,0 mL; disolver y diluir a volumen con Agua purificada.

Tomar una alícuota de 3,0 mL en un balón volumétrico de 100,0 mL, completar a volumen con Agua purificada. Leer la absorbancia a 246 nm

Preparación de las muestras: Lea directamente en el espectrofotómetro cada una de las muestras a 246 nm.

Cálculos

$$ppm \text{ de Trazodona} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{3 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times 0,06$$

Dónde:

Amt: Absorbancia de la muestra.

Aest: Absorbancia del estándar.

Pest: Peso del estándar.

0,06: Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método.

3.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

- 3.9.1 **Criterios de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: No mayor a 1000 UFC/g
Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras: No mayor a 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

- 4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo, biconvexo de color rosado pálido, lisos por ambas caras, libres de material extraño

4.2 IDENTIFICACIÓN

- 4.2.1 **Criterio de aceptación:** Los tiempos de retención de los picos correspondiente a Trazodona Clorhidrato en el cromatograma de la solución muestra corresponde al obtenido en la solución estándar tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

- 4.3.1 **Criterio de aceptación:** 148,0 – 172,0 mg/comp .

4.4 VALORACIÓN TRAZODONA

4.4.1 **Método:** HPLC

- 4.4.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio Monobásico, Ácido Fosfórico, Ácido Clorhídrico, Agua purificada tipo I.

- 4.4.3 **Solución inorgánica (Buffer KH_2PO_4 pH 5,5):** Pesar 3,3 g de fosfato de potasio monobásico, disolver en 1L de agua purificada tipo I. adicionar 1 mL de trietilamina. Ajustar a pH 5,5 con H_3PO_4 al 40%. Filtrar por membrana PVDF 0,45 μm .
- 4.4.4 **Diluyente (HCl 0,01N):** A 5000 mL de Agua purificada tipo I agregar 5 mL de Ácido Clorhídrico concentrado y llevar a volumen de 6000 mL con agua purificada.
- 4.4.5 **Fase móvil:** Buffer KH_2PO_4 pH 5,5 (65): Acetonitrilo (30): Metanol (5)
- 4.4.6 **Estándar stock de Trazodona:** Pesar 25 mg de estándar de Trazodona en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de diluyente y sonicar durante 10 minutos. Permitir enfriar, llevar a volumen con diluyente. (Concentración Trazodona 500 ppm).
- 4.4.7 **Estándar de Trazodona:** Transferir una alícuota de 5 mL del estándar stock de Trazodona a un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana tipo PVDF o Nylon de 0,45 μm , descartando los primeros 4 mL de solución. (Concentración de Trazodona 50 ppm).
- La solución estándar es estable por 9 horas almacenada en recipiente de vidrio con tapa, bajo las condiciones ambientales del laboratorio de control calidad.*
- 4.4.8 **Solución Stock muestra:** Triturar no menos de 10 comprimidos. Pesar 160 mg de muestra equivalentes a 50 mg de Trazodona, en un balón de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente y sonicar por 20 minutos. Enfriar la muestra y completar a volumen con diluyente. Dejar decantar por mínimo 10 minutos. (Concentración Trazodona 500 ppm).
- 4.4.9 **Solución Muestra:** A partir de la solución stock, transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 50 mL. Completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana tipo PVDF o Nylon de 0,45 μm , descartando los primeros 4 mL de solución (Máximo 3 muestras por filtro). (Concentración de Trazodona 50 ppm).

Tanto la solución muestra de valoración como de disolución son estables por 13 horas almacenadas en recipientes de vidrio con tapa, bajo las condiciones ambientales del laboratorio de control calidad.

4.4.10 Condiciones Instrumentales

Columna:	Luna C18 125*4.0 mm 5µm
Fase móvil:	Buffer KH ₂ PO ₄ pH 5,5 (65): Acetonitrilo (30):Metanol (5)
Temperatura:	35°C
Flujo:	1,5 mL/min
Longitud de onda:	246 nm (200 – 400)
Volumen de inyección:	20 µL
Tiempo de retención:	Trazodona 4,7 minutos Ancho de banda 4,4 – 5,3 minutos
Tiempo de corrida:	10 minutos
Concentración de trabajo:	50 ppm
Diluyente:	HCl 0,01N

4.4.11 **Procedimiento:** Usando las condiciones arriba descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2.0%. Luego inyecte dos muestras por duplicado.

4.4.12 Cromatograma guía

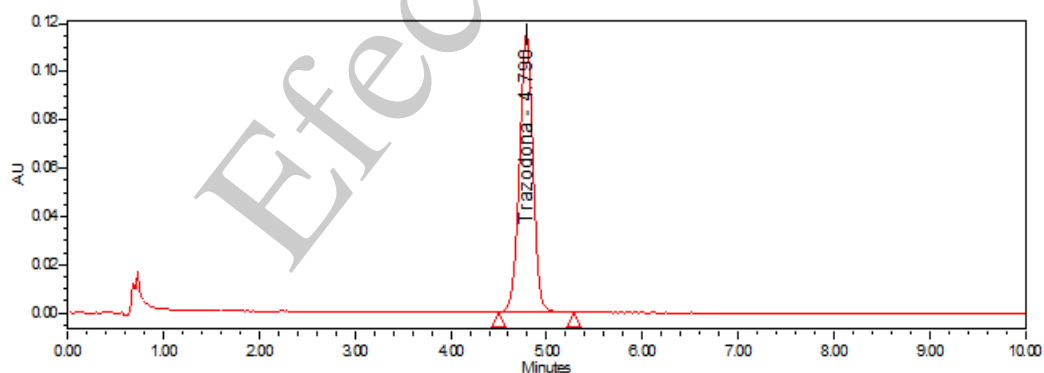


Figura N° 7 Cromatograma guía correspondiente a la solución estándar.

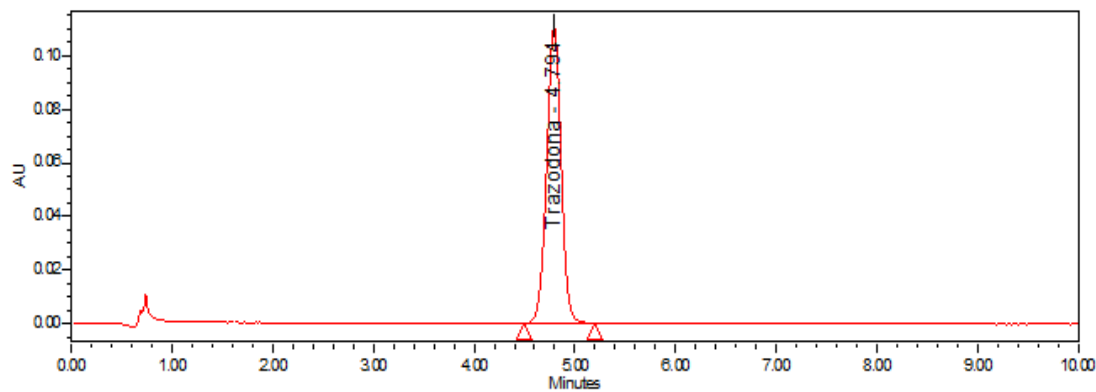


Figura N° 8 Cromatograma correspondiente a la solución muestra

4.4.13 Cálculos:

$$\text{Trazodona}_{\text{comp}} \frac{\text{mg}}{\text{comp}} = \frac{\text{Amt}}{\text{Aest}} \times \frac{\text{Pest}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \text{Fpx} \times \frac{100 \text{ mL}}{\text{Pmt}} \times \frac{50 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \text{PPcomp}$$

Dónde:

Am: Área de la muestra.
Aest: Área del estándar.
Pm: Peso de la muestra (mg).
Fp: Factor de potencia.
Pptab: Peso promedio de los comprimidos.

4.4.14 Criterio de aceptación: 45,0 – 55,0 mg/comp (90,0% - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.5.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Trazodona se disuelve en 60 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.6.1 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención Relativo	Criterio de aceptación (%)
Triazolopiridinona	0.1	-
Clorofenilpiperazina	0.5	-
Hidroxipropilclorofenil Piperazina	0.6	-
Isotrazodona	0.7	-
Trazodona Compuesto Relacionado C	0.85	-
Trazodona Clorhidrato	1.0	-
Trazodona dimero	1.1	-
Trazodona Compuesto Relacionado F	1.2	-
Análogo de Bispiperazina	1.4	-
Piperazina Bis (3-Clorofenil)	1.8 – 2.0	-
Algún producto de degradación individual inespecífica	-	1.0
Producto Total de Degradación	-	2.0

Tabla N°8 Criterios de aceptación Impurezas Orgánicas

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0%.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): No mayor 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): No mayor 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de Análisis Trazodona 50 mg Comprimidos CA-F2: Certificado de Análisis Trazodona 50 mg Comprimidos HC-PT-EST- F3: Hoja de Cálculo Producto y Estabilidad Trazodona 50 mg Comprimidos
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla N°9. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
NUEVO	21-02-12	Nueva fórmula	Reducción de masa.
1.0	30-03-20	Actualización	Migración a GEODE Actualización alineándola conforme a la USP 42 y a las validaciones IO 235-2020 y VD 236-2020. Sustentando bajo el control de cambio: 2020CALIP0081
2.0	14-09-20	Actualización	Se corrige el ancho de banda para la señal de Trazodona en la valoración y disolución, en el modelo de cálculo de la valoración se corrige la ecuación para expresar el resultado en mg de activo por comprimido, además de una forma alterna para hacer la conversión en porcentaje.

Tabla N°10. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD