

1 DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09705
Nombre	ACETAMINOFEN 100 mg/mL GOTAS / ACETAMINOFEN 100 mg/mL SOLUCIÓN ORAL
Principio activo	Acetaminofén
Forma farmacéutica	Gotas
Composición	Cada 1mL contiene 100mg de acetaminofén
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco y seco no mayor a 30°C, protegido de la humedad y la luz
Referencia especificación	Norma Técnica Propia, USP vigente

Tabla N°1 Datos de Producto Terminado.

2 **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y Botas de seguridad.

3 MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** Líquido translúcido de color rojo, con olor a fresa-cereza. Libre de partículas extrañas.

3.2. IDENTIFICACIÓN

3.2.1.A. **Criterios de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde al tiempo de retención del pico principal de la solución estándar, según se obtiene en la valoración de Acetaminofén.

3.2.2. B. El valor RF de la mancha principal obtenida en la solución muestra corresponde al valor RF obtenido en la solución estándar.

3.2.2.1. **Método:** Cromatografía CAPA FINA (TLC)

3.2.2.2. **Reactivos:** Cloruro de metileno y metanol

3.2.2.3. Condiciones Cromatográficas

Solvente de desarrollo:	Cloruro de metileno: Metanol (80:20)
Absorbente:	Placa Cromatográfica de silica gel de 0.25 mm.
Volumen de inyección:	10 µL
Distancia:	15cm del origen

3.2.2.4. **Preparación del estándar:** Pesar 10 mg de acetaminofén estándar de trabajo en un balón de 10 mL. Disolver y llevar a volumen con metanol. (Concentración: 1,0 mg/mL).

3.2.2.5. **Preparación de la muestra:** Tomar 1,0mL del producto en un balón de 10mL. Adicionar 5mL de metanol y agitar hasta homogenización. Llevar a volumen con metanol. Tomar una alícuota de 1mL en un balón volumétrico de 10mL y llevar a volumen con metanol. (Concentración: 1,0 mg/mL).

3.2.2.6. **Procedimiento:** Aplicar 10 µL de la solución muestra y la solución estándar, desarrollar el cromatograma en una cámara que contiene la fase móvil, hasta que el frente del solvente haya recorrido $\frac{3}{4}$ partes de la placa, retirar y dejar secar durante 10 min. Revelar con exposición a la luz ultravioleta.

3.3. GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.3.1. **Criterio de aceptación:** 1,100 - 1,200g/mL a 25°C

3.4. pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

3.4.1. **Criterio de aceptación:** 3,8 - 6,1

3.5. VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.

- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.5.1. **Criterio de aceptación:** No menos de 30 mL.

3.6. VALORACIÓN DE ACETAMINOFEN

3.6.1. **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.6.2. **Reactivos:** Hidrogenosulfato de Tetrabutilamonio, Hidróxido de Sodio, Acetonitrilo grado HPLC, Metanol grado HPLC Y Agua Grado HPLC

3.6.3. **Preparación solución de la Solución Buffer pH 3,0:** Pesar aproximadamente 3,30g de Hidrogenosulfato de Tetrabutilamonio en 1L de agua, ajustar la solución a pH 3,0 con hidróxido de sodio diluido.

3.6.4. Fase móvil

La fase móvil se trabaja de acuerdo al siguiente gradiente:

Tiempo (min)	Flujo (mL/min)	ACN %	BUFFER pH 3,0 %
0,0	1,0	15	85
3,0	1,0	15	85
3,5	1,0	85	15
6,3	1,0	85	15
6,5	1,0	15	85
9,0	1,0	15	85

Tabla 2. Gradiente de fase móvil

3.6.5. **Diluyente:** Metanol: agua purificada (25:75)

3.6.6. **Preparación de la solución estándar de Acetaminofén:** Pesar alrededor de 37,5mg de Acetaminofén estándar de trabajo y transferir a un balón volumétrico de 100mL. Adicionar 30 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con diluyente y homogenizar. Tomar una alícuota de 4mL y llevar a un balón volumétrico de 25mL. Completar a volumen con diluyente y homogenizar. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45µm (Concentración: 0,06 mg/mL Acetaminofén).

3.6.7. **Preparación de la muestra:** Pesar el equivalente a 3,0 mL del producto terminado (Aproximadamente de 3,4 g.) en un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 30mL de diluyente, agitar manualmente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Dejar enfriar y completar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 2mL y llevar a un balón volumétrico de 100mL. Completar a volumen con diluyente y homogenizar. Filtrar a través de membrana de 0,45 µm (Concentración: 0,06 mg/mL Acetaminofén).

Nota: Las muestras y el estándar presentan estabilidad en solución hasta de 12 horas después de ser preparadas.

3.6.8. Condiciones Instrumentales

Ítem	Condiciones
Columna	Sb Phenyl/Agilent 5µm, 4.6mm x 150mm
Fase Móvil	Ver tabla 2
Diluyente	Metanol: agua purificada (25:75)
Flujo	1,0mL/min
Detector	UV- Visible, 243nm
Temperatura de la columna	40°C
Volumen de Inyección	10µL
Tiempo de retención	3,1 minutos Ancho de banda 3,0 – 3,7 minutos

Tabla 3. Condiciones Cromatográficas

3.6.9. Procedimiento

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser $\leq 2,0\%$. Seguido realizar una inyección de cada una de las muestras.

Determinar la concentración de Acetaminofén en la muestra según se muestra en la siguiente ecuación.

3.6.10. Eventos de integración:

PARAMETRO	VALOR
Peak width	30,00
Threshold	50,00

Tabla 4. Eventos de integración acetaminofén

3.6.11. Cromatograma Guía

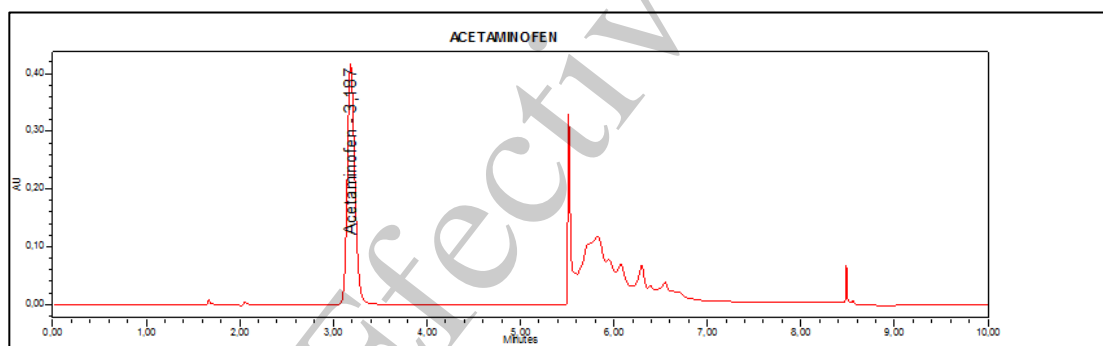


Figura 1. Cromatograma típico de la solución estándar para Acetaminofen

3.6.12. Cálculos

$$\%Acetaminofén = \frac{Amt}{Astd} * \frac{Wstd}{100mL} * \frac{4mL}{25mL} * \frac{Pot Std}{100} * \frac{100mL}{Wm} * \frac{100mL}{2mL} * \frac{D}{100mg} * 100$$

Dónde:

Amt: Área del pico principal en la muestra
Astd: Área del pico principal en el estándar
Wstd: Peso del estándar (mg)
Pot Std: Potencia del estándar (%)
Wm: Peso de la muestra (mg)
D: Densidad relativa

3.6.13. Criterios de aceptación: 90,0 - 110,0 mg/mL (90,0% – 110,0%)

3.7. VALORACIÓN DE BENZOATO DE SODIO

3.7.1. **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.7.2. **Reactivos:** Fosfato Monobásico de Potasio, Ácido fosfórico, Hidróxido de Sodio, Ácido Clorhídrico, Peróxido de Hidrógeno, Acetonitrilo grado HPLC, Metanol grado HPLC y Agua Grado HPLC.

3.7.3. **Preparación de buffer de fosfato monobásico de sodio pH 3,0:** Pesar aproximadamente 2,72g de Fosfato Monobásico de Potasio en 1L de agua (0,02M). Ajustar la solución a pH 3,0 con ácido fosfórico. Filtrar por membrana PVDF 0,45µm y desgasificar.

3.7.4. **Fase móvil:** Realizar una mezcla de Buffer pH 3,0 con Acetonitrilo en la siguiente proporción 70:30.

3.7.5. **Diluyente:** Preparar una mezcla de Agua: Metanol (75: 25)

3.7.6. **Preparación de la solución estándar de Benzoato de sodio:** Teniendo en cuenta la potencia y humedad del estándar, pesar con exactitud 20,0 mg de Benzoato de Sodio a partir del estándar de trabajo y llevar a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 70mL de diluyente y someta a ultrasonido durante 10 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 1,0 mL y llevar a balón volumétrico de 20 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar. (Concentración aproximada de Benzoato de Sodio 0,01 mg/mL).

3.7.7. **Preparación de la muestra:** Pesar el equivalente a 3 mg de Benzoato de Sodio a partir de producto terminado (Aproximadamente 3,4g de producto), en un balón volumétrico de 100mL. Adicionar 70mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 20 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con diluyente. Transferir una alícuota de 3,0mL a un balón volumétrico de 10mL y llevar a volumen con diluyente (Concentración aproximada de Benzoato de Sodio 0,009 mg/mL). Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar.

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución hasta 48 horas después de su preparación.

3.7.8. Condiciones cromatográficas

Ítem	Condiciones
Columna	Luna C8 150mm x 4,6 mm x 5µm
Fase Móvil	Buffer pH 3,0: Acetonitrilo (70:30)
Diluyente	Agua: Metanol (75: 25)
Flujo	1,0mL/min
Detector	UV- Visible, 230nm
Temperatura de la columna	40°C
Volumen de Inyección	10µL
Tiempo de retención	5,0 minutos Ancho de banda 4,7 – 5,4 minutos

Tabla 4. Condiciones Cromatográficas

3.7.9. **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser $\leq 2,0\%$. Seguido realice una inyección de cada una de las muestras. Determine la concentración de Benzoato de Sodio en la muestra según se muestra en la siguiente ecuación

3.7.10. Cromatograma Guía

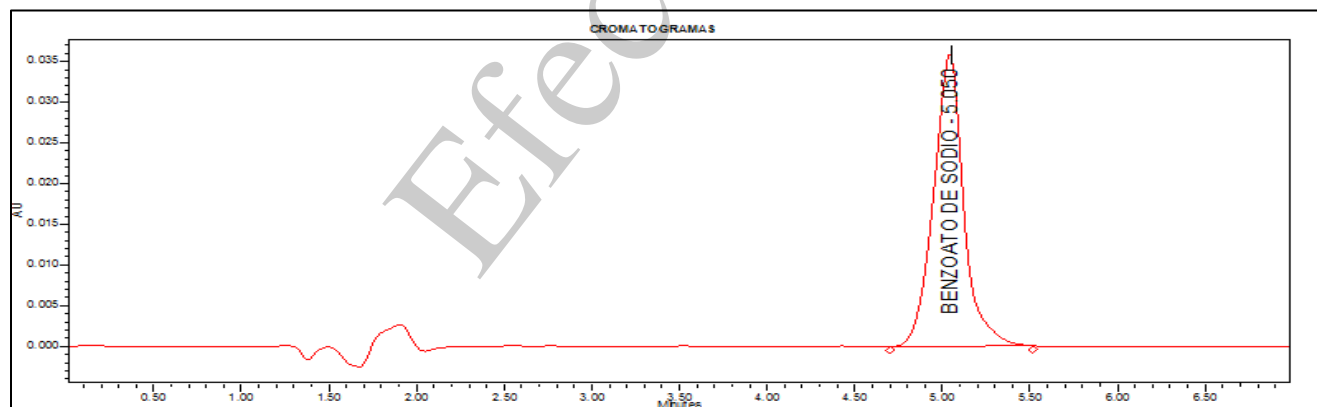


Figura 2. Cromatograma guía Estándar

3.7.11. Eventos de integración:

PARAMETRO	VALOR
Peak width	30,00
Threshold	50,00

Tabla 5. Eventos de integración Benzoato de sodio

3.7.12. Cálculos

$$\% \text{Benzoato de Sodio} = \frac{Amt}{Astd} * \frac{Wstd}{100mL} * \frac{1mL}{20mL} * \frac{Pot Std}{100} * \frac{100mL}{Wm} * \frac{10}{3} * \frac{D}{1mg} * 100$$

Dónde:

Amt: Área del pico principal en la muestra
Astd: Área del pico principal en el estándar
Wstd: Peso del estándar (mg)
Pot Std: Potencia del estándar (%)
Wm: Peso de la muestra (mg)
D: Densidad relativa

3.7.13. **Criterios de aceptación:** 0,9 - 1,1 mg/mL (90,0% – 110,0%)

3.8. VALORACIÓN 4-AMINOFENOL

3.8.1. Método

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.8.2. **Reactivos:** Hidróxido de Sodio, Ácido Clorhídrico, Peróxido de Hidrogeno, Acetonitrilo grado HPLC, Agua Grado HPLC, Citrato de sodio Dihidrato, Ácido Cítrico Anhidro, Fosfato Monobásico de Potasio y Fosfato Dibásico de Sodio

3.8.3. **Preparación de Buffer Fosfato 10mM a pH 7,0:** Pesar aproximadamente 0,60 g de Fosfato monobásico de potasio y 0,82 g de Fosfato dibásico de sodio a un matraz volumétrico de 1L, disolviendo con agua a volumen a un pH de 7,0.

3.8.4. Fase móvil

Se trabaja de acuerdo al siguiente gradiente:

Tiempo (min)	Buffer Fosfato 10mM (%)	Agua (%)	Acetonitrilo (%)
0	90	5	5
5	90	5	5
7	10	10	80
7,1	90	5	5
10	90	5	5

Tabla 6. Gradiente de fase móvil

- 3.8.5. **Preparación de solución amortiguadora:** Pesar aproximadamente 4,0 g de citrato de sodio dihidrato y 1,5 g de ácido cítrico anhidro, en un balón volumétrico de 1L, diluir y llevar a volumen con agua.
- 3.8.6. **Diluyente:** Preparar una mezcla de Solución Amortiguadora y Acetonitrilo (90: 10).
- 3.8.7. **Preparación de la solución madre de 4-aminofenol:** Pesar con exactitud 25mg de estándar de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 50mL, adicionar 20mL de diluyente y disolver completamente; llevar a volumen con diluyente. Transferir una alícuota de 1,0mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 20mL y llevar a volumen con diluyente. (Concentración: 0,025 mg/mL de 4-Aminofenol). Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.
- 3.8.8. **Preparación de la solución estándar de 4-aminofenol:** Pesar con exactitud 10 mg de estándar de trabajo de acetaminofén en un balón volumétrico de 50 mL y disolver con 20 mL de diluyente. Adicionar al balón anterior una alícuota de 15 mL de la solución madre de 4-aminofenol y llevar a volumen con diluyente. (Concentración: 0,2 mg/mL de acetaminofén y 0,0075 mg/mL de 4-Aminofenol). Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.
- 3.8.9. **Preparación de la solución de adecuabilidad (LOQ):** Transfiera 1mL de la solución madre de 4-Aminofenol (ítem 3.8.7) en un balón volumétrico de 10mL y lleve a volumen con diluyente. (0,0025 mg/mL de 4-Aminofenol). Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.
- 3.8.10. **Preparación de la muestra:** Pesar aproximadamente 11,5 g de muestra equivalente a 1000mg de acetaminofén en un balón volumétrico de 100mL, adicionar 40 ml de diluyente y llevar a ultrasonido por 20 minutos. Atemperar y llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 25 ml de la solución anterior a un balón volumétrico ámbar de 50 mL. Diluir a volumen con diluyente y mezcle. (5,0mg/mL de acetaminofén). Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.

Nota: Las muestras y los estándares presentan una estabilidad en solución hasta 12 horas después de su preparación.

3.8.11. **Condiciones cromatográficas:**

Ítem	Condiciones
Columna	Acclaim Mixed-Mode WCX-1 (150*4.6) 5µm L85
Fase Móvil	Ver ítem 3.8.4
Diluyente	Solución Amortiguadora y Acetonitrilo (90: 10)
Flujo	1,0mL/min
Detector	UV- Visible, 300nm
Temperatura de la columna	30°C
Volumen de Inyección	10µL
Tiempo de retención	Acetaminofén 7,1 minutos Ancho de banda 6,8 - 7,5 minutos 4-Aminofenol 4,4 minutos Ancho de banda 4,2 – 4,7 minutos
Concentración de Trabajo	Acetaminofén 5000 ppm 4-Aminofenol 7,5 ppm

3.8.12. Cromatograma Guía

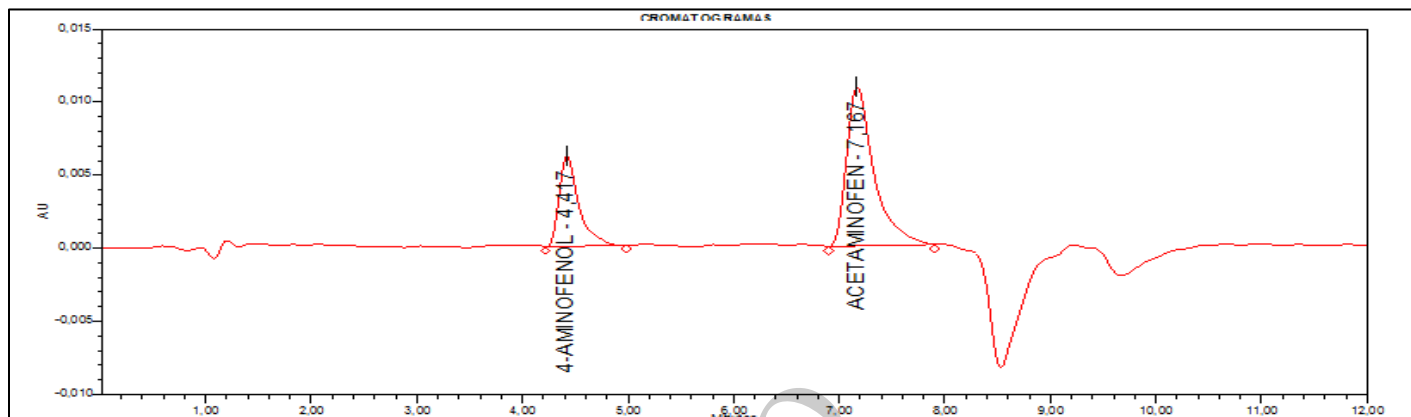


Figura 3. Cromatograma típico de la solución estándar para 4- Aminofenol

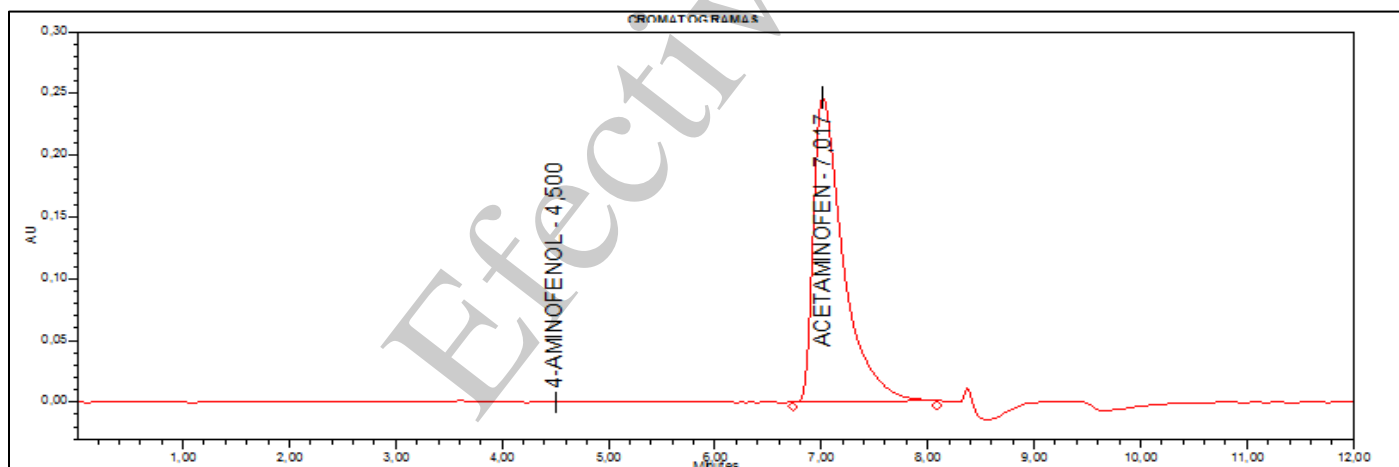


Figura 4. Cromatograma típico de la solución muestra para 4- Aminofenol

3.8.13. Condiciones de Adecuabilidad

- El factor de asimetría para el 4-Aminofenol no es mayor a 1,5, en la solución estándar.
- El RSD del área de 5 inyecciones consecutivas del estándar no es mayor a 5,0%.
- La relación s/n para el pico de 4-Aminofenol no es menor de 20 en la solución de adecuabilidad (LOQ)
- En caso de No detectables, reportar como menor al LOD=0,01% que equivale a 0,5 ppm.
- La resolución debe ser menor a 1,0 entre el 4-Aminofenol y el pico mas cercano en la solución estándar.

3.8.14. Procedimiento

Realizar una inyección de Blanco (diluyente), una inyección de la solución de adecuabilidad (LOQ), seguido de 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD debe ser $\leq 5,0\%$. Por último realizar una inyección de cada una de las muestras por lote.

3.8.15. Cálculos

Determinar la concentración de 4- Aminofenol en la muestra de acetaminofén según la siguiente ecuación:

$$\%4 - \text{Aminofenol} = \frac{A_{imp}}{A_{std}} * \frac{W_{std}}{50mL} * \frac{1mL}{20mL} * \frac{15mL}{50mL} * \frac{Pot\ Std}{100} * \frac{100mL}{W_m} * \frac{50}{25mL} * \frac{1mL}{100mg} * D * 100$$

Dónde:

A_{imp}: Área del 4-aminofenol en la muestra
A_{std}: Área del pico principal en el estándar
W_{std}: Peso del estándar (mg)
Pot Std: Potencia del estándar (%)
W_m: Peso de la muestra (g)
D: Densidad relativa

3.8.16. **Criterio de aceptación:** No más de 0,15% de 4-Aminofenol.

3.9. MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.9.1. Criterio de aceptación:

- Recuento Bacteriano aerobios (TAMC): Máximo 100UFC/mL
- Recuento de mohos y levaduras (TYMC): Máximo 10UFC/mL
- E.coli: ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia complex: ausente/1 mL

4.0 ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Líquido translúcido de color rojo, con olor a fresa-cereza. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde al tiempo de retención del pico principal de la solución estándar, según se obtiene en la valoración de Acetaminofén.

4.3 pH

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 3,8 – 6,1

4.4 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** 1,100 – 1,200 a 25°C

4.5 VALORACIÓN ACETAMINOFEN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** 90,0% -110,0% (90,0 – 110,0 mg/mL)

4.6 VALORACIÓN BENZOATO DE SODIO

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** 90,0% - 110,0% (0,9 – 1,1 mg/mL)

4.7 VALORACIÓN 4-AMINOFENOL

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** No más de 0,15% de 4-Aminofenol

4.8 MICROBIOLOGIA*

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24, 36 Natural

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación:

- Recuento Bacteriano aerobios (TAMC): Máximo 100UFC/mL
- Recuento de mohos y levaduras (TYMC): Máximo 10UFC/mL
- E.coli: ausente/1mL
- Burkholderia cepacia complex: ausente/1mL

4.9 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

(*) Se realiza en los meses 3 y 6 Acelerado y 24 natural

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.9.1 Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.10 PÉRDIDA DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 3 y 6 acelerado y 6, 12 y 24 natural. Reporte los resultados en el formato CALI-SOP-000516 F8.

Criterio de aceptación: Evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio

4.11 ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo con lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 30mL

Tiempo de vida útil: 24 meses.

Tiempos de análisis: día 0 y 5.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.11.1 **Criterio de aceptación:** cumple con las especificaciones de las pruebas realizadas para los análisis de estabilidad.

4.12 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5.0 ANEXOS

5.1 Anexo 1-Especificaciones técnicas de producto terminado: **ESP-PT**

5.2 Anexo 2-Especificaciones técnicas de producto terminado en estabilidad: **ESP-EST**

6.0 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Acetaminofén 100mg/mL gotas Acetaminofen 100 mg/ml solución oral HC-PT-EST- F2: Hoja de Cálculo Producto
ALMACENAMIENTO	Bach Record
PROTECCIÓN	Acceso autorizado sólo al personal de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más 1 año
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

7.0 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	14-06-17	Nuevo	Control de cambio generado en Phenix No. 2017CALIP0032
01	11-09-17	Requerimiento regulatorio, actualización de instructivos de análisis y formatos Respetivos	Se actualiza el instructivo, las hojas de cálculo y las especificaciones, se retira la frase "RERERENCIA ANALITICA" de la tabla de especificaciones técnicas y se remplaza por la frase "REFERENCIA ESPECIFICACIÓN"
02	03-10-17	Por solicitud de los entes regulatorios de los países de la región de Latinoamérica se hace el cambio de color en la descripción del producto Acetaminofén gotas, adicional se coloca el nombre del producto: Acetaminofén 100mg/mL Gotas Acetaminofén 100mg/mL Solución Oral	Se actualiza el instructivo, las hojas de cálculo y las especificaciones, se cambia el parámetro de la descripción, Se modifica la especificación del parámetro de descripción de acuerdo al color de la solución, se incluye la palabra Rojo, y se quita la palabra Rosado. Control de cambio generado en Phenix No. 2017CALIP0315,
1.0	08-10-21	Actualización	Migración a GEODE Cambio de nombre de la prueba Control de Peso por Perdida de Peso en el item de Estabilidades Actualización de las pruebas: 4-Aminofenol: validación DI-P-2016-018 REV 01 Valoración Acetaminofén: validación DI-V-2016-015 REV 01 Valoración Benzoato de sodio: validación DI-V-2016-023 REV 01 Actualización de las especificaciones de microbiología • Recuento Bacteriano aerobios (TAMC): Máximo 100UFC/mL • Recuento de mohos y levaduras (TYMC): Máximo 10UFC/mL • E.coli: ausente/1mL • Burkholderia cepacia complex: ausente/1mL Sustentado con el número de control de cambio: No 2021CALIP0390