

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL	CLST09543
NOMBRE:	EZETIMIBA 10 mg TABLETA
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta
PRINCIPIO ACTIVO:	Ezetimiba
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene 10 mg de Ezetimiba
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redonda de color blanco-crema, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A. El tiempo de retención de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del estándar.

3.2.2 B. El espectro UV de la muestra de Ezetimiba exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5 mg/Tab – 107,5 mg/Tab

3.4 VALORACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO

Proceder conforme al ítem de valoración para Estabilidades.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 9,0 mg/tab – 11,0 mg/tab (90,0% – 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE CONTENIDO

3.5.1 **Método:** HPLC

3.5.2 **Modificador inorgánico, Fase móvil (Buffer Fosfato de potasio monobásico):** Pesar 6,8 g de Fosfato de potasio monobásico, disolver en 1000 mL de agua purificada tipo I. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

3.5.3 **Solución A:** Mezclar 600 mL de modificador inorgánico, con 300 mL de Acetonitrilo y 100 mL de tetrahidrofurano. Homogenizar y desgasificar.

3.5.4 **Diluyente:** Mezclar 600 mL de Acetonitrilo con 400 mL de agua purificada tipo I. Adicionar 1 mL de ácido acético. Homogenizar y desgasificar. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente antes de su uso.

3.5.5 **Condiciones cromatográficas**

Fase Móvil	Solución A (90): ACN (10)
Diluyente	ACN: H ₂ O: Ácido Acético (600:400:1)
Columna	YMC Pack ODS-A 150 mm*4.6 mm 5µm
Temperatura	Ambiente
Flujo	1,3 mL/min
Detector	UV
Longitud de onda	232 nm
Volumen de inyección	50 µL
Tiempo de retención	Ezetimiba 7,8 minutos Ancho de banda 7,4-8,2 minutos

3.5.6 **Preparación Solución Estándar:** Pesar 10 mg de estándar de Ezetimiba, transferir a un balón volumetrico de 100 mL, adicionar 50 mL de diluyente y sonicar por 10 minutos. Llevar a un volumen con diluyente y agitar (Concentración 100 ppm)

3.5.7 Preparación de la muestra: Tomar individualmente 10 tabletas. Transferir cada una de ellas a sendos balones volumétricos de 100 mL, desintegre las tabletas en 10 mL de agua purificada tipo I, Adicionar 50 mL de diluyente y sonicar por 30 minutos. Llevar al ultrasonido hasta completa disolución. Enfriar y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PTFE de 0,45 µm con un volumen de descarte de 2 mL, de no contar con dicha membrana utilizar Nylon o PVDF descartando 4 mL de la solución.

Nota: La solución estándar es estable durante un periodo de tiempo de 18 horas después de su preparación, la muestra presenta una estabilidad por un periodo de tiempo de 50 horas después de su preparación

3.5.8 Adecuabilidad del sistema:

ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	0,8 – 1,5
Platos teóricos	No es menor a 4000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2,0%
Concentración de Trabajo	100 ppm

3.5.9 Procedimiento: Inyectar por separado la solución estándar (5 veces), la solución de correlación (2 veces) y la solución muestra (1 vez). Registrar los cromatogramas.

3.5.10 Cromatograma Guía

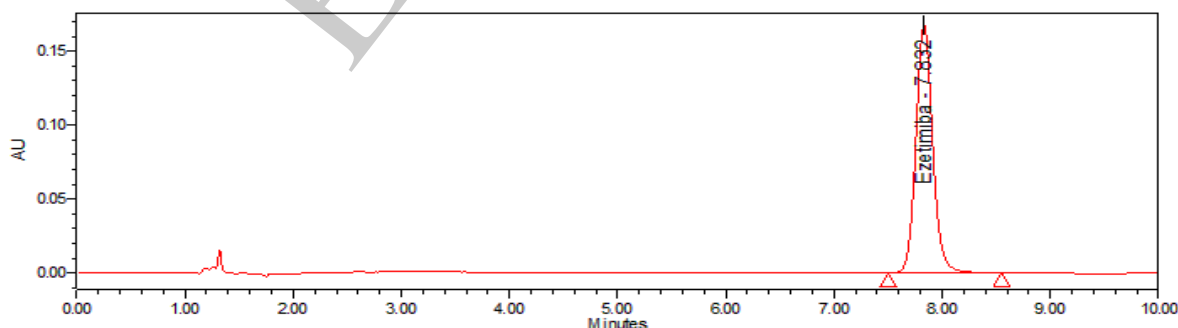


Figura 1. Cromatograma correspondiente a estándar de Ezetimiba para Uniformidad

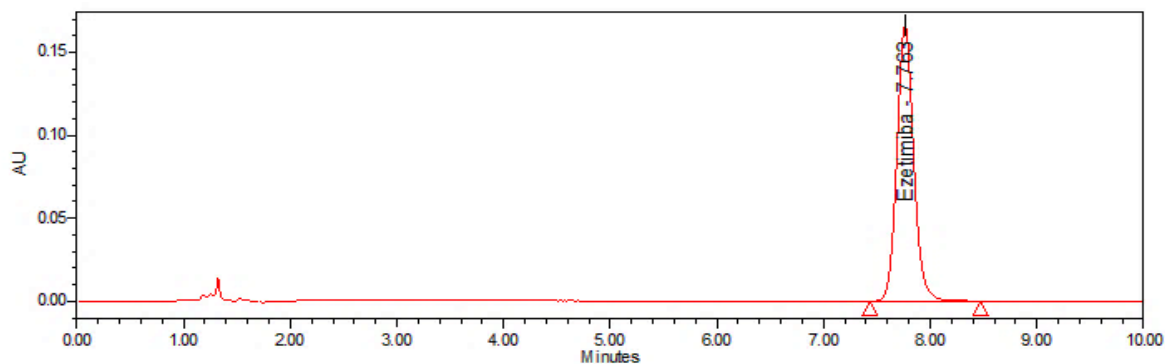


Figura 2. Cromatograma correspondiente a muestra de Ezetimiba para Uniformidad

3.5.11 Cálculos

Determinar la cantidad de porcentaje de Ezetimiba, utilizando las siguientes fórmulas.

$$\%Ezetimiba = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times F_{px} \times \frac{100 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times 100\%$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la muestra
A_{std}: Área del estándar de Ezetimiba
P_{std}: Peso del estándar de Ezetimiba (mg)
F_p: Potencia del estándar de Ezetimiba

3.5.12 Criterio de aceptación: Ezetimiba el valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°2. Tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades
k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 s adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

3.6.1 **Técnica:** Espectroscopia UV.

3.6.2 **Reactivos:** Acetato de sodio anhidro, Lauril sulfato de sodio (L.S.S), Ácido acético.

3.6.3 **Preparación del medio de disolución:** Disolver 12,3 g de Acetato de sodio anhidro y 13,5 g de Laurilsulfato de sodio en 3 Litros de agua y ajustar el pH a 4,5 con ácido acético.

3.6.4 Condiciones de Disolución Test I

Medio:	Buffer acetato pH 4,5 +0,45%LSS
Volumen:	500 mL
Aparato:	N°2 (paletas)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	30 minutos
Concentración:	20 ppm
Temperatura:	37°C±0,5 °C

3.6.5 **Estándar Ezetimiba:** Tomar una alícuota de 5,0 mL de la solución stock de Ezetimiba, usada en valoración en un balón de 50 mL. Completar a volumen con medio de disolución. Mezclar y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración final: Ezetimiba 20 ppm).

3.6.6 **Preparación solución muestra:** Adicionar el medio en cada vaso del Disolutor, permitir que alcance una temperatura de 37°C±0,5°C Colocar cada tableta en cada uno (6 vasos), e iniciar el equipo para realizar el test a 50 rpm. En los tiempos establecidos retirar aproximadamente 20 mL de muestra de la zona media del vaso del disolutor (entre la superficie del medio de disolución y la parte superior de la paleta giratoria) y a no menos de 1 cm desde la pared del

vaso. Filtrar una porción de la muestra por PVDF y determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de 233 nm. (Concentración final. Ezetimiba 20 ppm).

3.6.7 Cálculos

Determine la cantidad disuelta de Ezetimiba según la siguiente fórmula.

$$\%Ezetimiba = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{500 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Astd: Área del estándar de Ezetimiba
Pstd: Peso del estándar de Ezetimiba (mg)
Pot: Potencia del estándar de Ezetimiba

3.6.8 **Criterios de Aceptación:** No menos de 80% (Q) es disuelto en 30 minutos como Ezetimiba.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etap a	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

Tabla N°3. Criterios de Aceptación Disoluciones.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

*Fase móvil, columna, detección, temperatura, volumen de inyección, flujo y diluyente: **Utilizar lo establecido para el método de valoración.***

- 3.7.1 **Hidróxido de sodio en Metanol (0,01N):** Pesar 2 g de hidróxido de sodio, disolver en 10 mL de agua purificada tipo I, llevar a 500 mL con metanol. Transferir 10 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con metanol.
- 3.7.2 **Solución de adecuabilidad:** En un beaker de vidrio de 25 mL, pesar 30 mg de estándar de trabajo, adicionar 10 mL de hidróxido de sodio metanólico 0,01 N. Llevar por 15 minutos, a la estufa de sacado a una temperatura de 55°C (**No usar plancha de calentamiento**). Retirar y adicionar 4 gotas de ácido clorhídrico 0,5 N. Agregar 20 mL de diluyente y sonicar durante 10 minutos. Realizando lavados, transferir a un balón volumétrico de 100 mL, aforar con diluyente. Agitar y transferir a vial filtrando con membrana de Nylon o PVDF de 0,45µm, saturar el filtro con 2 mL de muestra.
- 3.7.3 **Solución Stock Límite de cuantificación:** A partir del estándar preparado para la valoración (200 ppm), transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 100 mL. Aforar con diluyente (10 ppm).
- 3.7.4 **Solución límite de cuantificación:** De la solución stock límite de cuantificación, transferir una alícuota de 3 mL a un balón volumétrico de 50 mL. Llevar a volumen con diluyente. (0,6 ppm). Agitar y transferir a vial filtrando con membrana de Nylon o PVDF de 0,45µm, saturar el filtro con 2 mL de solución.
- 3.7.5 **Solución de sensibilidad:** De la solución stock límite de cuantificación, transferir una alícuota de 2 mL a un balón volumétrico de 100 mL. Llevar a volumen con diluyente. (0,2 ppm). Agitar y transferir a vial filtrando con membrana de Nylon o PVDF de 0,45µm, saturar el filtro con 2 mL de solución.
- 3.7.6 **Solución muestra:** Triturar no menos de 20 Tabletas. Pesar el equivalente a 30 mg de Ezetimiba (aproximadamente 300 mg de muestra), transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Enfriar y completar a volumen con diluyente. Agitar y transferir a vial, filtrando con membrana de Nylon o PVDF de 0,45µm, saturar el filtro con 2 mL de muestra. **La solución es estable por un lapso de 12 horas.** (Ezetimiba 300 ppm).

3.7.7 **Procedimiento:** Realizar una inyección de: Solución de adecuabilidad, solución de sensibilidad, solución límite de cuantificación, blanco y solución muestra. Evaluar los criterios de adecuabilidad.

3.7.8 **Condiciones de adecuabilidad:**

Nombre	Tiempo de retención (min)	Trr
Pico inespecífico 1	8,2	0,66
Ezetimiba Isómero 1	9,5	0,76
Ezetimiba Isómero 2	11,3	0,90
Ezetimiba	12,5	1,00
Pico inespecífico 2	13,8	1,10
Ezetimiba tetrahidropirano análogo	15,0	1,20
Ezetimiba Cetona	19,5	1,56

ítem	Criterio de aceptación
Relación señal ruido solución de sensibilidad	No menor a 3,0
Ancho de banda Ezetimiba	12,4 – 13,9 minutos
Relación señal ruido solución límite de cuantificación	No es menor de 10: De no cumplir con este criterio, se deben realizar 3 inyecciones consecutivas de la solución límite de cuantificación, y su %RDS debe ser menor a 6,0%
Resolución	No menos de 1,5 entre Ezetimiba y el pico inespecífico 2
Tiempo de corrida	Solución sensibilidad y límite de cuantificación: 22 minutos Adecuabilidad, muestra y blanco: 40 minutos

3.7.9 **Cálculos:**

$$\%Impureza = \frac{\text{Área Impureza}}{\sum \text{Área de todos los picos presentes en la solución muestra}} \times 100\%$$

En caso de que el resultado sean no detectable reportar como menor al límite de detección que es 0,2 ppm equivalentes a 0,07% en función de la concentración de la muestra.

3.7.10 Cromatograma Guía

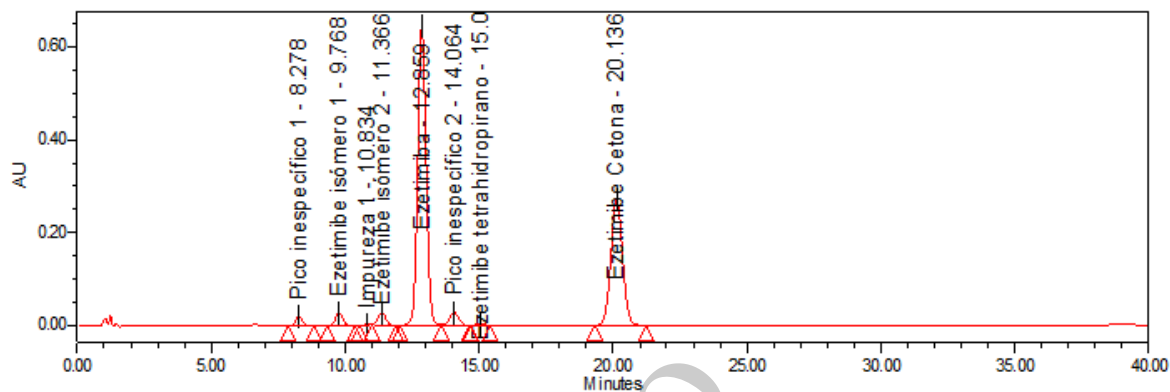


Figura 3. Cromatograma correspondiente a la Solución de Adecuabilidad

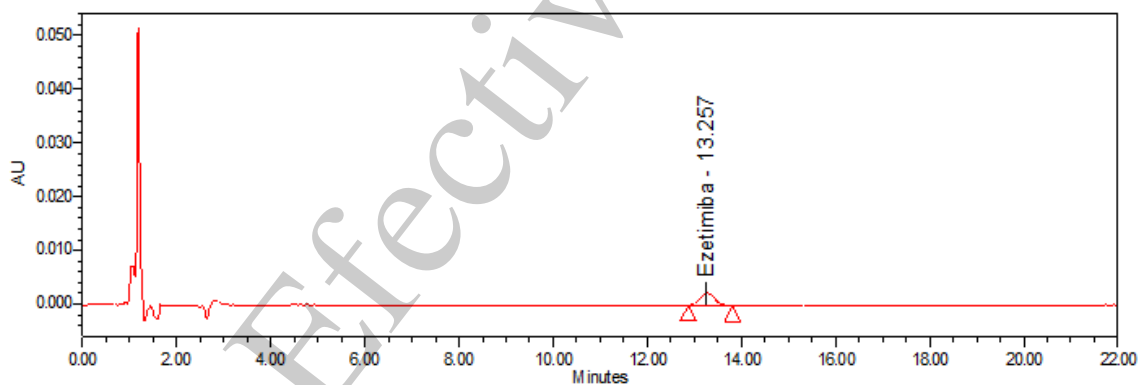


Figura 4. Cromatograma correspondiente a la solución límite de cuantificación

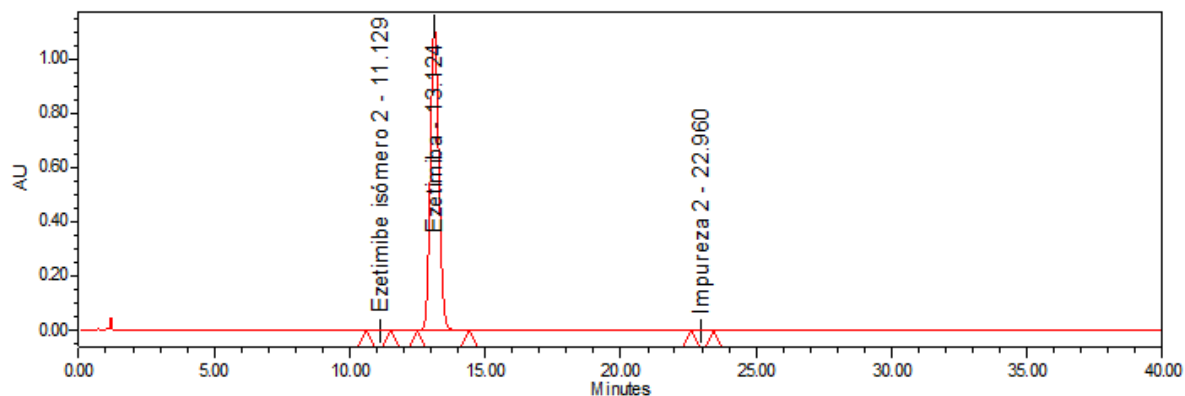


Figura 5. Cromatograma correspondiente a la solución muestra

3.7.11 Criterio de aceptación:

Descripción	Especificación
Ezetimiba Tetrahidropirano Análogo	No mayor a 0,2%
Ezetimiba Cetona	No mayor a 0,2%
Cualquier impureza inespecífica	No mayor a 0,2%
Total impurezas	No mayor a 0,5%

No cuantificar las señales inespecíficas e isómeros relacionados en el ítem 3.7.8.

3.8 MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

- 3.8.1 **Criterios de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: No mayor a 1000 UFC/g
Recuento total de mohos y levaduras: No mayor a 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

- 4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redonda de color blanco-crema, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

- 4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del estándar.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5 mg/Tab – 107,5 mg/Tab.

4.4 VALORACIÓN DE EZETIMIBA

4.4.1 **Técnica:** HPLC-UV

4.4.2 **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico, Tetrahidrofurano (THF), Acetonitrilo (ACN), Ácido acético Glacial, Agua Purificada Tipo I.

4.4.3 **Modificador inorgánico, Fase móvil (Buffer fosfato de potasio monobásico):** Pesar 6,8 g de fosfato de potasio monobásico. Disolver en 1000 mL de agua purificada tipo I. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm

4.4.4 **Fase Móvil Unificada Buffer fosfato de potasio monobásico:THF:ACN:** En un recipiente ámbar, mezclar 100 mL de Tetrahidrofurano con 300 mL de Acetonitrilo y 600 mL de modificador inorgánico. Homogenizar y desgasificar. (60:10:30)

4.4.5 **Diluyente:** Mezclar 600 mL de Acetonitrilo con 400 mL de agua purificada tipo I. Adicionar 1 mL de ácido acético glacial. Homogenizar y desgasificar. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente antes de su uso.

4.4.6 **Solución Estándar:** Pesar el equivalente a 20 mg de Ezetimiba RS, transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Enfriar y completar a volumen con diluyente, agitar y transferir a vial filtrando con membrana de Nylon o PVDF de 0,45µm, saturar el filtro con 2 mL de muestra. La solución es estable por un lapso de 50 horas. (Ezetimiba 200 ppm).

4.4.7 **Solución muestra:** Triturar no menos de 20 tabletas. Pesar el equivalente a 20 mg de Ezetimiba (aproximadamente 200 mg de polvo de tableta), transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Enfriar y completar a volumen con diluyente, agitar y transferir a vial filtrando con membrana de Nylon o PVDF de 0,45 µm, saturar el filtro con 2 mL de muestra. La solución es estable por un lapso de 50 horas. (Ezetimiba 200 ppm).

4.4.8 **Condiciones Cromatográficas**

Columna:	YMC Pack ODS-A 150 mm*4,6 mm 5µm
Fase Móvil:	Unificada Buffer KH ₂ PO ₄ : THF:ACN (60:10:30)
Diluyente:	ACN: H ₂ O:Ácido Ácético (600:400:1)
Volumen de inyección:	50 µL
Temperatura de la columna:	Ambiente

Detector: UV PDA
Longitud de onda: 232 (200 nm – 400 nm)
Flujo: 1.5 mL/min
Tiempo de corrida: 16 minutos
Tiempo de retención: 13,1 minutos Ancho de banda: 12,4 -13,9 minutos
Concentración de trabajo: 200 ppm

4.4.9 **Procedimiento:** Realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar de valoración, 2 inyecciones del estándar de correlación y una inyección de cada solución muestra. Evaluar los criterios de adecuabilidad.

4.4.10 **Condiciones de adecuabilidad:**

ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	0,8 – 1,5
Platos teóricos	No es menor de 4000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2,0%

4.4.11 **Cálculo**

$$Ezetimiba \text{ mg/comp} = \frac{\text{Área Ezetimiba Muestra}}{\text{Área Ezetimiba Estándar}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mta}} \times PPT$$

Dónde:

Pstd: Peso estándar (mg)
Pot: Potencia estándar
Pmta: Peso muestra (mg)
PTT: Peso promedio (mg)

4.4.12 **Cromatogramas Guía**

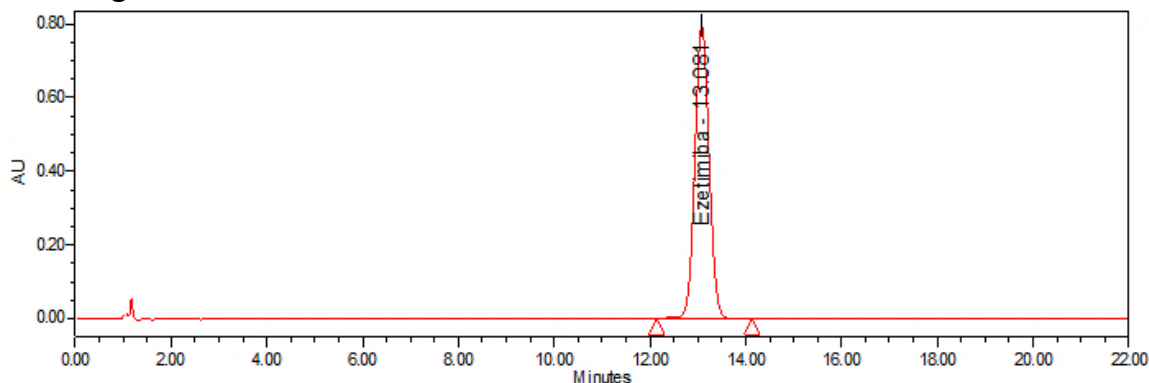


Figura 6. Cromatograma correspondiente a la solución Estándar

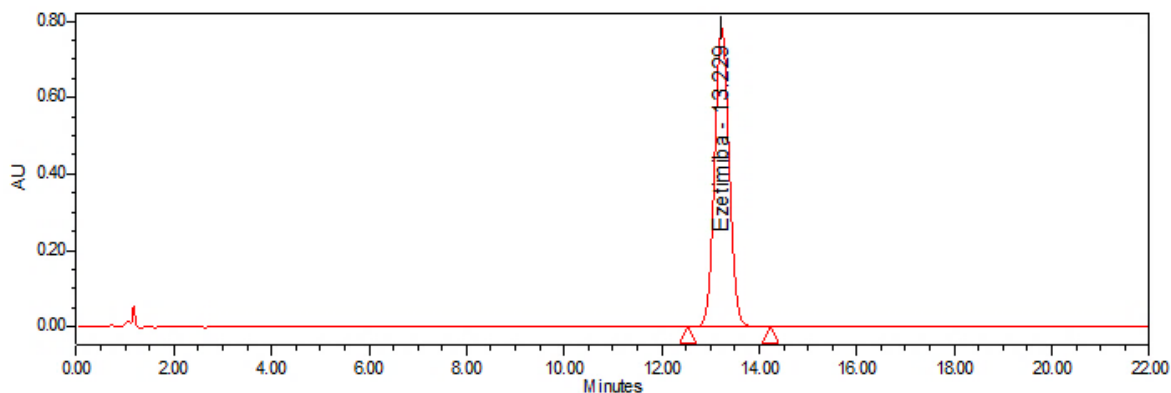


Figura 7. Cromatograma correspondiente a la solución Muestra

4.4.13 **Criterio de aceptación:** 9,0 mg/comp - 11,0 mg/comp (90,0% - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** No menos de 80% (Q) es disuelto en 30 minutos como Ezetimiba

4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.6.1 **Criterio de aceptación:**

Descripción	Especificación
Ezetimiba Tetrahidropirano Análogo	No mayor a 0,2%
Ezetimiba Cetona	No mayor a 0,2%
Cualquier impureza inespecífica	No mayor a 0,2%
Total impurezas	No mayor a 0,5%

No cuantificar las señales inespecíficas e isómeros relacionados en el ítem 3.7.8.

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0%.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: No mayor a 1000 UFC/g
Recuento total de mohos y levaduras: No mayor a 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de Análisis Ezetimiba 10 mg Tabletás CA-F2: Certificado de Análisis Ezetimiba 10 mg Tabletás
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla N° 5. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	06/10/2011	Actualización Instructivo	Se cambia el logo Se cambia tableta por comprimido Se corrige la palabra Ezetimibe por Ezetimiba

02	31/01/2013	Actualización	Se cambia el formato de documentación, se eliminan la bitácora de analista según control de cambios N° 2012CALIP073.
03	26/05/2014	Modificación	Se cambia la forma de preparación de la solución estándar Se modifica la forma de preparación de la solución estándar de la disolución según monografía interna. Se realizan hojas de cálculo para producto terminado y estudio de estabilidades.
04	01/03/2016	Actualización	Se inserta cromatograma guía. Se establecen parámetros de adecuabilidad cromatográfica. Se elimina la nota donde se establece que solo al producto de exportación se le realiza análisis microbiológico, así mismo se retira el certificado que no contempla dicho análisis.
1.0	23/09/2020	Actualización	Migración a GEODE Actualización del test de Disolución alineada a la USP vigente conforme a la validación VMA-D-031 Rev 03. Se incluye el test de Impurezas Orgánicas conforme a la Validación VIO-251-2020 Rev 01 Se incluye la Identificación B por espectroscopia. Se reemplaza la palabra comprimidos por tableta. Estos cambios sustentados 2020CALIP0268

Tabla N° 6. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD